

Rainbow line

LINEA ESTETICA

MADE IN ITALY

CELLULAB Ultrasuoni a bassa frequenza



Blue MOON
www.blue-moon.it

COSTRUTTORI DI APPARECCHIATURE PER L'ESTETICA E L'ELETTROMEDICALE
SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2000 E UNI EN ISO 13485:2004

Blue-Moon S.r.l. Via Jucker 28, 20025 Legnano (MI) Italia T +39 0331 464428 F +39 0331 464177 info@blue-moon.it

NUMERO VERDE
800 984 638



CELLULAB è un'apparecchiatura ad ultrasuoni a bassa frequenza (UBF) che permette di trattare le adiposità localizzate e gli inestetismi della cellulite.


Il sistema è dotato di un manipolo applicatore con ampia area d'azione pari a 19,6 cm². Una delle più interessanti particolarità risiede nella struttura di separazione fra testa di emissione e impugnatura che elimina la trasmissione di frequenza sulla mano dell'operatore, evitando possibili danni allo stesso.

La frequenza di emissione è stata fissata a 40 KHz mentre la potenza di emissione può essere regolata dal 10 al 100% per un valore massimo di 30 W. Tali parametri, nella valutazione pratica, si sono dimostrati un eccellente compromesso dal punto di vista del rapporto sicurezza/prestazioni.

TRATTAMENTI PER INESTETISMI

- **Adiposità localizzata.**
- **Cellulite edematosa.**
- **Cellulite fibrosa.**
- **Riattivazione della circolazione superficiale.**

COME AGISCE

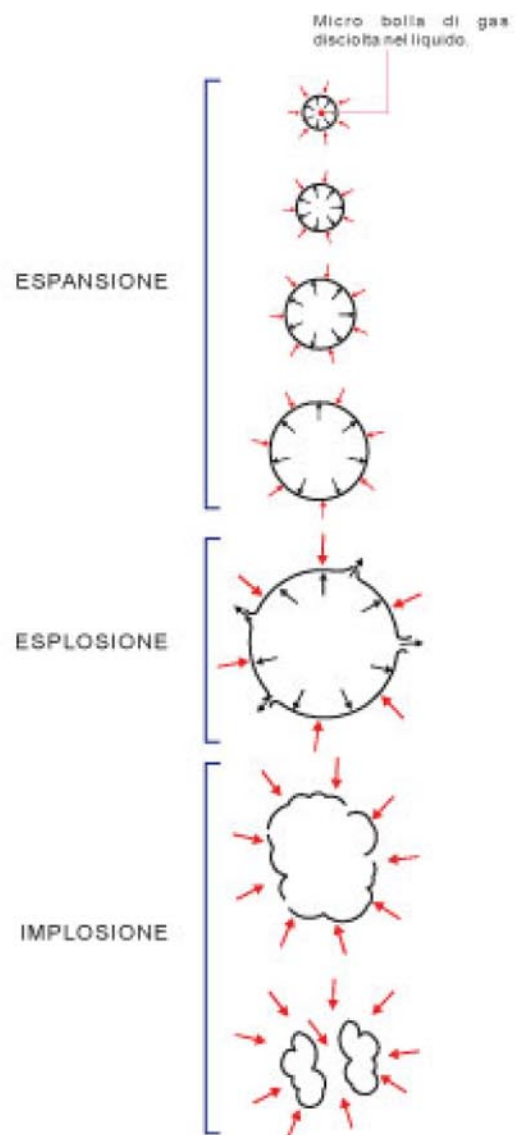

PROGRAMMI DEDICATI A SECONDA DEL TIPO DI TRATTAMENTO



STANDARD
Indicato nelle masse fibrose per non causare eccessiva dolorabilità alla parte trattata.



ENERGY
Indicato nelle masse con ritenzione di liquido da moderata ad importante.



ENERGY PLUS
Indicato per le masse adipose importanti più o meno compatte.

Manipolo e spatola di applicazione



Le onde di compressione e di espansione generate dall'oscillazione della capsula contenuta nel manipolo (ultrasuoni a bassa frequenza) causano l'aumento di volume di micro-bolle di gas disciolte nei liquidi del tessuto bersaglio, fino al raggiungimento di un punto critico al quale segue un'esplosione e conseguente implosione delle bolle stesse.

Questa fase di collasso comporta la formazione di un'onda d'urto (ONDA SHOCK) che andrà ad aggredire le masse grasse e le nodosità tipiche della cellulite.

Il sistema permette l'emissione di ultrasuoni a frequenze composite di 40 kHz, con un effetto di "spacchettamento" indiretto del grasso, apprezzabile in modo progressivamente crescente all'aumentare del contenuto di liquidi nel tessuto oggetto di trattamento.

PECULIARITA' E SICUREZZA

Manipolo ergonomico con impugnatura disaccoppiata meccanicamente dalla testa di emissione.

Il sistema garantisce la TOTALE SICUREZZA PER L'OPERATORE che altrimenti potrebbe accusare disturbi alla struttura ossea della mano e del polso.

Emissione di frequenze composite variabili a 40 kHz.

Protocollo di trattamento redatto e testato da equipe medica.

Cellulab non è solo un'apparecchiatura, ma una metodologia consolidata.

RISULTATI

Riduzione complessiva dell'adiposità e della globosità addominale



Esito dopo 8 sedute a cadenza settimanale



Esito dopo 2 sedute a cadenza settimanale

Sollevamento del profilo del gluteo grazie ad una doppia azione lipolitica e lipotonica

Miglioramento della texture epidermica e riduzione dell'effetto "buccia d'arancia"

METODOLOGIA D'APPLICAZIONE



Addome



Addome



Fianchi

L'azienda

Blue-Moon® nasce come spin off del marchio Caccia Elettronica Industriale e diviene ben presto protagonista nell'ambito dell'elettromedicale.

Mission

La filosofia aziendale è orientata principalmente al perfezionamento dei livelli qualitativi delle apparecchiature, per garantire affidabilità, sicurezza e standard professionali.

Questo è reso possibile grazie alla collaborazione e alla ricerca dell'equipe tecnica di Blue-Moon® che costantemente si relaziona con Medici, specialisti del settore e Università per garantire sicurezza e innovazione.

Qualità

Negli anni Blue-Moon® ha sviluppato un processo evolutivo di crescita accreditandosi delle certificazioni UNI EN ISO 9001 e 13485 come garanzia inconfondibile di qualità ed eccellenza.

Tutti i prodotti Blue-Moon® rispettano pertanto tutte le normative vigenti, subendo un iter di collaudo severo attraverso test di professionisti del settore Medica ed estetico.

Garanzia

Blue-Moon® progetta, ingegnerizza, assembla e collauda le proprie apparecchiature completamente in Italia. I prodotti Blue-Moon® sono stati scelti dalla **Società di Medicina Agorà di Milano** grazie ai risultati sorprendenti e alla straordinaria affidabilità che da sempre contraddistingue il marchio "made in Italy" Blue-Moon®.

Presenti in

ITALY | Azerbaijan | **Belgium** | Chile | **China** | Czech Republic | **Egypt** | Estonia | **France** | Germany | **Iran** | Japan
Latvia | Lithuania | **Morocco** | Poland | **Portugal** | Russia | **Slovakia** | Slovenia | **Spain** | Switzerland | **UAE**

Brevetti Blue-Moon®



Blue-Moon® patents

Blue MOON®

www.blue-moon.it

MANUFACTURERS OF ELECTROMEDICAL EQUIPMENTS

BLUE-MOON S.R.L. Via JUCKER 28, 20025 LEGNANO (MI) ITALY
T +39.0331.464428 / 464364 / 466797

info@blue-moon.it export@blue-moon.it



PRODOTTO DISTRIBUITO DA / DISTRIBUTED BY

UNI EN ISO 13485

CERTIFIED QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM
FOR MEDICAL DEVICES

OBL

OWN
BRAND
LABELLING

ODM

ORIGINAL
DESIGN
MANUFACTURER

OEM

ORIGINAL
EQUIPMENT
MANUFACTURER

P.I./C.F. 12421080156

Cap. Sociale: € 20.800,00 int.vers.

Reg. Imp. Milano n° 12421080156 - REA 1556855

Registro A.E.E. n. IT0801000000085 Milano

postacertificata@pec.blue-moon.it